



Gebrauchsanweisung

Hinweise zum Einstieg, zur Pflege und zur Aufbewahrung.

BWELY Akupressur-Set · Modell Aku-Set1



BWELY Akupressur-Set im Überblick



Die zusammengerollte Matte beim Transport

Hinweise zur Verwendung

Hier findest du die Hinweise zum Einstieg, zur Pflege und zur Aufbewahrung deines BWELY Akupressur-Sets. Lies die Sicherheitshinweise vor der ersten Anwendung.

1. Produkt und Verwendungszweck

BWELY Akupressur-Set, Modell Aku-Set1, ASIN BOH83SX1YL, Farbe Beige/Braun.

Das BWELY Akupressur-Set richtet sich an Erwachsene für Wellness und Entspannung. Es ersetzt keine medizinische Beratung oder Behandlung. Der digitale Begleitinhalt ergänzt die sechs physischen Teile; er ist kein siebtes Teil.



BWELY Akupressur-Set im Überblick



BWELY Etikett und Naht im Detail

Dein Set erkennen



01 Akupressurmatte

72 × 43 cm




02 Nackenkissen

26 × 40 cm



03 Lendenkissen

14 × 43 cm

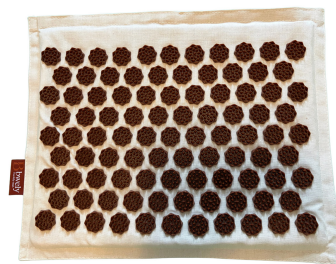

04 Bein- und Fußmatte

36 × 43 cm



05 Einstiegstuch

96 × 40 cm



06 Tragetasche

37 × 47 cm

Produktansichten einzeln eingepasst, ohne gemeinsame Abbildungsskala. Die angegebenen Maße beziehen sich auf das jeweilige Teil.

2. Sicherheit vor der Anwendung

Die Spitzen können sich anfangs intensiv anfühlen. Du musst keine Schmerzen aushalten. Bei Schwangerschaft, Hautproblemen, akuten Schmerzen, Durchblutungsstörungen oder gesundheitlicher Unsicherheit hole vor der Anwendung ärztlichen Rat ein. Beachte zusätzlich die Sicherheitshinweise des Herstellers; die hier genannten Fälle sind keine vollständige Liste möglicher Gegenanzeigen.

Beachte zusätzlich die zu deinem Produkt gehörenden Herstellerhinweise.

Wichtig für deinen Einstieg

Du musst keine Schmerzen aushalten. Bei Schmerzen brich die Anwendung ab.



Einstiegstuch



Rosetten und textile Oberfläche im Detail

3. Einstieg und Anwendungsdauer

Nutze am Anfang das Einstiegstuch oder ein dünnes T-Shirt. Beginne mit einer kurzen Anwendung und passe die Dauer deinem Empfinden an. Bei Schmerzen brich die Anwendung ab. Eine feste Anwendungsdauer oder tägliche Steigerung wird hier nicht vorgegeben.

4. Erwärmen der Innenkissen

1. Nimm den Bezug des Nacken- oder Lendenkissens ab. Erwärme nur das Innenkissen mit Buchweizenfüllung.
2. Heize den Backofen auf 80 bis 100 °C vor.
3. Erwärme das Innenkissen 15 Minuten im vorgeheizten Backofen.
4. Prüfe die Wärme vor Hautkontakt.



Geöffneter Nackenkissenbezug mit Innenkissen




Lendenkissen – ohne Rosetten

5. Pflege und Aufbewahrung

Die abnehmbaren Bezüge werden von Hand bei 30 °C gewaschen. Diese Angabe gilt ausschließlich für die Bezüge und wird nicht auf die Füllungen übertragen. Beachte zur Pflege der einzelnen Füllungen die Herstellerhinweise.

Die Tragetasche gehört zum Set und dient der Aufbewahrung und dem Transport. Beachte für die einzelnen Füllungen und Bezüge die jeweiligen Pflegehinweise am Produkt.

6. Fragen zum Produkt und zur Bestellung

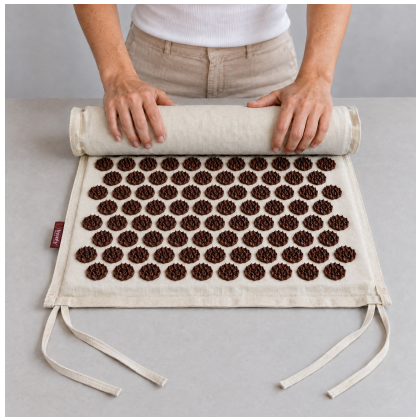

Die Matte beim Zusammenrollen



Die BWELY Tragetasche im Alltag

Bei Fragen zum Produkt erreichst du BWELY unter info@bwely.com. Informationen zu deiner Bestellung findest du in deinem Amazon-Konto bei der jeweiligen Bestellung. Preis, Verfügbarkeit und Lieferbedingungen stehen im jeweiligen Angebot auf Amazon.de.

Informationen zu deiner Bestellung

Die Bestellung erfolgt auf Amazon.de. Öffne bei Fragen zu einer bestehenden Bestellung den entsprechenden Eintrag in deinem Amazon-Konto.